


# KONZENTRIERTE WÄRMETHERAPIE BEI INSEKTENSTICHEN

## Das Wirkprinzip

Die Applikation kurzer, konzentrierter Wärmeeinwirkung auf eine eng begrenzte Hautstelle, stellt eine schonende Behandlungsoption dar. Man geht davon aus, dass hierdurch verschiedene Signalwege und somit Immun- und Entzündungsreaktionen beeinflusst werden.

Zudem kann eine Regulierung der Ausschüttung von Histamin und Abbaenzymen Entzündungsreaktionen dämpfen und Insektengifte inaktivieren. Bei einem Insektenstich kann selbst bei späterer Anwendung, der Juckreiz schnell und effektiv gestoppt werden. Die Behandlung erfolgt mittels zertifiziertem Medizinprodukt, welches über einen integrierten Mikroprozessor Temperaturen in einem Bereich um 51 °C erzeugt und diese, je nach Einstellung, über 3 oder 6 Sekunden aufrechterhält.

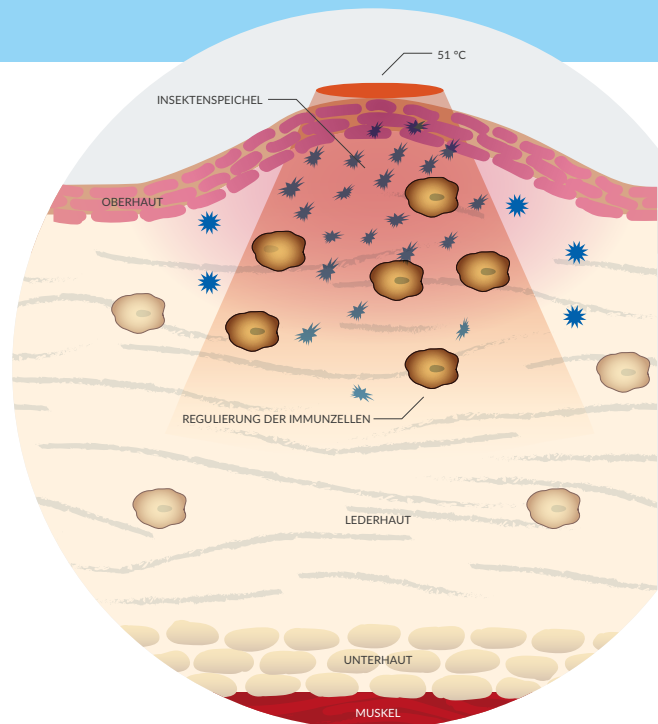

## Insektenstiche

Insektenstiche sind im Sommer kaum vermeidbar. Hausmittel, Salben und Gele helfen oft nur begrenzt gegen Juckreiz und Schwellung. Bei sensiblen Personen oder durch einen Juck-Kratz-Teufelskreis kann es zu starken Lokalreaktionen und Entzündungen kommen.



bite away® lindert durch Insektenstiche und -bisse verursachten Juckreiz, Schwellungen und Rötungen und kann so den Juck-Kratz-Teufelskreis durchbrechen.

## Einfache Anwendung

bite away® wird mit der keramischen Kontaktfläche auf dem Einstich oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die gewählte Zeit gehalten. Die Anwendung sollte bei Bedarf wiederholt werden.

## Für jeden geeignet

Das Gerät arbeitet rein physikalisch: Auch bei Allergikern, Schwangeren und Kindern kann bite away® angewendet werden. Kinder ab 12 Jahren können bite away® auch selbstständig bedienen und in Eigenregie anwenden.

Die Haut wird über die kurze Anwendungsdauer nicht geschädigt.